

AUDAR[®]

User Manual

E1



August International Ltd

Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812978

www.audarwatch.com

- EN Smart Healthcare Watch
- FR Montre Connectée Santé
- DE Intelligentes Gesundheitsarmband
- IT Healthcare Intelligente d'Orologio
- ES Pulsera Inteligente para el Cuidado de la Salud
- JP スマートヘルスケアウォッチ

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté le Bracelet de Santé Connecté Audar E1. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes déjà familier avec un produit similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Ne démontez pas le E1 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et tout autre réglementation en vigueur dans votre pays.

Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en terme de recyclage.

Déclaration de Conformité







La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lu sur notre site internet <http://augustint.com/en/declaration/>

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service-fr@augustint.com

1. Consignes de Sécurité

■ Utilisation et Rangement de l'Appareil

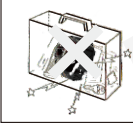	Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0°C - 50°C. Température de conservation -10°C - 60°C.		Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
	Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.		Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
	Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.		Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.

	N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.		Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détergent en poudre, une solution contenant de l'alcool, du benzène, un combustible ou un produit chimique de nettoyage.
---	---	--	--


2. Caractéristiques Principales

- ECG/PPG Fréquence Cardiaque et Pression Artérielle
- Compteur de Pas, Distance Parcourue et Calories
- Analyse de la Qualité du Sommeil
- Notifications d'Appels et Messages
- Compatible avec Apple iOS et Android

3. Contenu de la Boite



E1

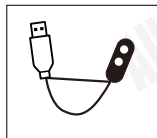

Câble de recharge
USB magnétique



Manuel d'utilisation

4. Dénomination des Parties de Fonctions



1. Affichage couleur
2. Bouton tactile
3. Bouton Allumer / Éteindre
4. Anneau ECG
5. Bracelet

Guide de Démarrage Rapide

1. Scanner le QR code ci-dessous avec votre appareil ou chercher "AUDAR" sur Google Play ou App Store pour télécharger l'application.



Android 4.4 ou supérieur ou iOS 8.2 ou supérieure requis


1. Veuillez recharger l'appareil entièrement avant la première utilisation. Pour recharger l'appareil, tirer le côté du bracelet ayant la boucle afin de dévoiler le port de charge USB. Brancher le câble USB fourni au bracelet E1 et à un port USB alimenté. S'il ne charge pas, veuillez changer le câble de sens.
2. L'indicateur de batterie progressera. Une fois complet, une batterie pleine sera affichée. Veuillez-vous assurer d'utiliser un chargeur 5V
3. Appuyer en maintenant le bouton tactile pendant 3 secondes pour allumer le E1.
4. Veuillez-vous assurer que le bracelet se situe à moins de 10 mètres de l'appareil à connecter. Pour le connecter, lancer l'application « AUDAR » et appuyer sur « Connecter Bracelet ». S'assurer que les permissions soient autorisées ou accepter le système requis lorsque demandé.
5. Une fois connectée, entrer vos informations personnelles et appuyer sur "Save". Insérer vos objectifs journaliers (nombre de pas par jour) et appuyer sur « Sauvegarder » une fois terminé pour être redirigé vers la page d'accueil de l'application.
6. Le E1 est prêt à être utilisé.

Sommaire

1. Consignes de Sécurité	1
2. Caractéristiques Principaux	2
3. Contenu de la Boîte	2
4. Dénominations des Parties et Fonctions	2
5. Recharge	5
6. Utilisation	5
6.1 Bracelet	5
6.1.1 Heure et Date (affichage par défaut)	5
6.1.2 Pas, Distance et Calories	6
6.1.3 Variabilité de la Fréquence Cardiaque (ECG)	6
6.1.4 Fréquence Cardiaque	6
6.1.5 Messages	7
6.1.6 Trouver un Appareil	7
6.1.7 Mode Sommeil	8
6.1.8 Chronomètre	8
6.1.9 Informations E1	8
6.1.10 Messages	9
6.1.11 Trouver mon Téléphone	9
6.1.12 Paramètre d'affichage	10
6.1.13 Luminosité	10
6.1.14 Informations	11
6.2 Application AUDAR	12
6.2.1 Application AUDAR	12
6.2.2 Connexion	13
6.2.3 Informations Personnelles	13
6.2.3.1 Page d'accueil	14
6.2.3.2 Compteur de pas	14
6.2.3.3 Sommeil	15
6.2.3.4 Variabilité de la Fréquence Cardiaque (ECG)	16
6.2.3.5 Pression Artérielle	17
6.2.3.6 Fatigue	18
6.2.4 Options	19
6.2.4.1 Informations Personnelles	19
6.2.4.2 Rapport hebdomadaire	20
6.2.4.3 Activation Appareil Photo	20
6.2.4.4 Course	20
6.2.4.5 Paramètres de l'Appareil	21
6.2.4.6 Paramètres Généraux	23
6.2.4.7 A propos	23
6.2.4.8 Informations sur CareMate	23
7. Dépannage	26
8. Détails Techniques	26
9. Garantie	27

5. Recharge

Pour recharger le E1, veuillez utiliser le câble USB magnétique fourni en le branchant à un port USB alimenté.

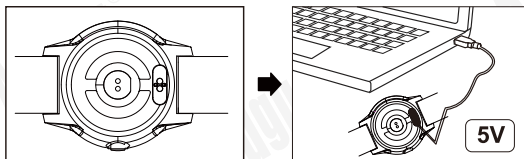

L'icône de la batterie apparaît sur l'appareil pendant la recharge. Lorsque la recharge est terminée, une batterie complète s'affiche. Veuillez-vous assurer que le voltage de sortie soit de 5V.

6. Opération

6.1 Montre

Appuyer et maintenir le bouton tactile 3 secondes pour allumer le E1
Pour éteindre le E1 :

1. Appuyer sur le bouton tactile et choisir E1 System Information mode.
 2. Appuyer et maintenir le bouton tactile 3 secondes
 3. Appuyer sur le bouton tactile pour valider
 4. Appuyer et maintenir le bouton tactile pendant 3 secondes pour confirmer vouloir éteindre le E1
- Appuyer sur le bouton pour activer l'écran. Une fois activé, ce dernier s'éteindra automatiquement après 5 secondes. Lorsque l'affichage est activé, appuyer sur le bouton tactile pour naviguer entre les différents modes : Heure et Date (par défaut), Pas, Calories, Distance, ECG, Fréquence Cardiaque, Pression Artérielle, Sommeil, Mode sport, Chronomètre, Messages, Trouver un appareil, Affichage, Luminosité et Système d'information E1.

Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale

6.1.1 Heure et Date (Affichage par défaut)



Jour

Date (JJ/MM)

Affichage de l'heure

Pas

Fréquence cardiaque

6.1.2 Compteur de Pas



Pas

Le E1 affiche le nombre de pas effectué depuis le début de la journée. Afin d'avoir des données les plus précises, il est recommandé d'indiquer vos informations précises (Se référer à la section 5.2.2)

6.1.3 Calories



Calories

Le E1 calcule les calories brûlées en fonction du nombre de pas effectué et de la distance parcourue.

6.1.4 Distance



Distance

Le E1 calcule la distance parcourue en fonction du nombre de pas effectué. Pour plus de précision, il est recommandé de renseigner vos détails personnels de la façon la plus précise possible.

6.1.5 ECG



ECG



ECG



Please touch the metal ring



Testing, Wait 28's



TO APP

Lorsque le mode ECG est sélectionné et que vous touchez l'anneau ECG, le E1 mesure la variation de votre fréquence cardiaque via électrocardiogramme. Lors de la mesure, placer votre doigt sur l'anneau métallique jusqu'à ce qu'elle se termine. Cela peut prendre 30 secondes. Une fois la mesure prise, les informations ECG peuvent être vérifiées sur l'application AUDAR.

Remarque : Si la forme de l'ECG est anormale, la fréquence cardiaque et pression artérielle peuvent ne pas être précises. Veuillez procéder à une nouvelle mesure. Si votre doigt est trop sec, veuillez l'humidifier afin de procéder à une nouvelle mesure.

Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale

6.1.6 Fréquence Cardiaque



Fréquence Cardiaque

Lorsque le mode Fréquence Cardiaque est sélectionné, le E1 commence à mesurer votre fréquence cardiaque. Cela prend jusqu'à 1 minute. Une fois la mesure prise, le E1 vibrera et affichera votre fréquence cardiaque en Battement Par Minute (BPM).

6.1.7 Pression Artérielle



Pression Artérielle

Lorsque le mode Pression artérielle est activé, le E1 mesure votre pression artérielle. Cela peut prendre jusqu'à 1 minute. Une fois terminé, le E1 vibrera et affichera la mesure.

6.1.8 Sommeil



Sommeil

Lorsque le mode sommeil est sélectionné, le E1 affiche les informations à propos de votre sommeil.

6.1.9 Chronomètre



Stop Watch



Stop Watch

Chronomètre

Appuyer et maintenir le bouton pendant 3 secondes pour démarrer le chronomètre. Appuyer sur le bouton pour le mettre en pause ou reprendre le décompte.

Lorsque le chronomètre est en pause, appuyer et maintenir le bouton pour retourner au menu principal.

Remarque : Le temps maximum du chronomètre est de 99 minutes (1h et 39 minutes). Une fois cette durée atteinte, le chronomètre recommencera à zéro 00:00:00.

6.1.10 Messages



Messages

Lorsque le mode Messages et sélectionné, le E1 affiche les messages reçus sur le téléphone connecté. Appuyer et maintenir le bouton pendant 3 secondes pour que le E1 affiche les détails des messages. Appuyer sur le bouton pour changer de message.

6.1.11 Trouver mon Téléphone



Find Phone

Trouver mon Téléphone

Appuyer et maintenir le bouton pendant 3 secondes pour activer la fonction Trouver un Appareil. L'appareil connecté au bracelet se mettra à sonner ou vibrer selon les paramètres. Il sera ainsi localisable.

Remarque : L'appareil connecté doit être dans un rayon de 10 mètres. Si vous ne l'entendez pas, essayer de changer de lieu et recommencer.

6.1.12 Paramètre d'affichage



Dials

Paramètre d'affichage

Appuyer sur le bouton tactile pour sélectionner les différents affichages.



Affichage1



Affichage2



Affichage3



Affichage4

6.1.13 Luminosité




Brightness

Luminosité

Appuyer sur le bouton tactile 3 secondes pour ouvrir les paramètres de luminosité. Appuyer ensuite sur le même bouton pour ajuster le niveau de luminosité.

6.1.14 Informations

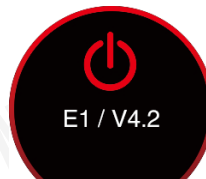

E1 / V4.2

Informations

Les informations E1 donne accès à un identifiant unique pour le bracelet. Cela est utile pour connecter l'appareil lorsqu'il y a d'autre E1 à proximité.



Français

6.2 AUDAR Application

Scanner le QR code ci-dessous avec votre appareil ou chercher "AUDAR" sur Google Play ou App Store pour télécharger l'application.






Android 4.4 ou supérieur ou iOS 8.2 ou supérieur requis.

6.2.1 Connexion

1. Activer le Bluetooth sur votre appareil et s'assurer qu'il se trouve à moins de 10m de E1.
2. Lancer l'application "AUDAR" et sélectionner "Connecter Bracelet".
3. Sélectionner E1 dans la liste des appareils.
4. Si plusieurs E1 se trouvent à proximité, vérifier les informations du bracelet afin de sélectionner le bon (Voir section 5.1.10)
5. Une fois connecté, l'icône Bluetooth apparaît sur l'écran du E1.

Remarque : Pour les appareils Android, s'assurer que les permissions soient accordées à l'application AUDAR. Pour les appareils iOS, confirmer les informations requises du Bluetooth.

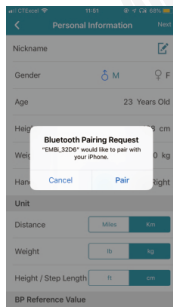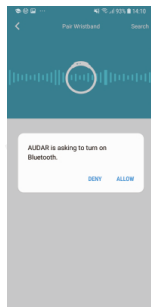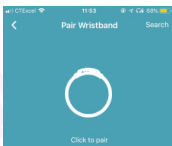

6.2.2 Informations Personnelles

Une fois le E1 connecté, renseigner vos informations personnelles et appuyer sur "Suivant". Indiquer les objectifs journalier (nombre de pas à effectuer chaque jours) et appuyer sur « Sauvegarder » pour retourner à la page d'accueil.

Les informations personnelles peuvent être modifiées à tout moment. (Voir section 5.2.4.1)



6.2.3 Page d'accueil

La page d'accueil permet d'afficher toutes les données sur un écran, tel le fréquence cardiaque, la pression artérielle, la fatigue et variabilité de la fréquence cardiaque.




Remarque : Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale.

6.2.3.1 Compteur de Pas

Le nombre de pas effectué s'affiche sur la page d'accueil. Appuyer sur la section pour afficher les détails.

Remarque : Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale.

- Faire glisser la date vers la droite pour afficher les données des jours précédents.
- Appuyer sur une des barres du graphique pour afficher le nombre exact de pas effectué.
- Sous le graphique se trouvent les informations supplémentaires telles nombre de pas, distance parcourue, calories brûlées et progression par rapport à l'objectif du jour.
- Appuyer sur "Notes" pour changer l'objectif journalier (le nombre de pas à effectuer par jour).
- Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour changer l'affichage de données.
- Appuyer sur "Partager" et choisir un réseau social pour partager vos données les plus récentes.

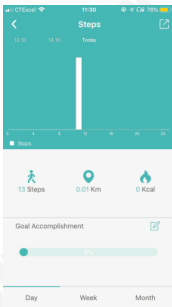


6.2.3.2 Sommeil

Les données les plus récentes relatives au sommeil s'affichent sur la page d'accueil. Appuyer sur la section pour afficher les détails.

Remarque : Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale.

- Faire glisser la date vers la droite pour afficher les données des jours précédents
- Appuyer sur une des barres du graphique pour afficher la durée exacte du sommeil le jour concerné.
- Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour changer l'affichage des données.

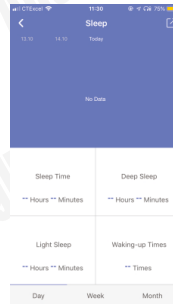


6.2.3.3 Fréquence Cardiaque

Les données les plus récentes relatives à votre fréquence cardiaque sont affichées sur la page d'accueil. Appuyer sur la section pour afficher les détails, voir l'historique ou effectuer une prise de données en temps réel.

Remarque : Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale.

- La mesure la plus récente est affichée dans la partie supérieure de l'écran.
- Appuyer sur "Mesure unique" pour prendre une nouvelle mesure.
- Appuyer sur "Mesure en temps réel" pour afficher votre fréquence cardiaque en temps réel. Appuyer à nouveau sur « Mesure en temps réel » pour désactiver la fonction. Remarque : La fonction de mesure en temps réel doit être fermée pour retourner sur la page d'accueil.
- L'historique des données est affiché en dessous du graphique. Faire glisser l'écran vers le haut pour afficher les données.
- Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour changer l'affichage des données. Faire glisser la date vers la droite pour afficher l'historique des données.
- Appuyer sur "Partager" et choisir un réseau social pour partager vos données les plus récentes.


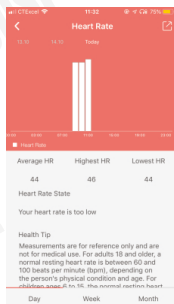


6.2.3.4 Variabilité de la Fréquence Cardiaque (ECG)

L'analyse VFC est affichée sur la page d'accueil. Appuyer sur la section pour afficher les détails ou pour effectuer une analyse en temps réel.

Remarque : Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale.

- La mesure la plus récente s'affiche sur la partie supérieure de l'écran.
- Appuyer sur "Mesure unique" pour effectuer une prise de mesure.
- Appuyer sur "Mesure en temps réel" pour analyser la variabilité de votre fréquence cardiaque. Appuyer à nouveau sur « Mesure en temps réel » pour désactiver la fonction. Remarque : la fonction de mesure en temps réel doit être désactivée pour retourner sur la page d'accueil.
- L'historique des données est affiché en dessous du graphique. Faire glisser l'écran vers le haut pour afficher les données.
- Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour changer l'affichage des données. Faire glisser la date vers la droite pour afficher l'historique des données.

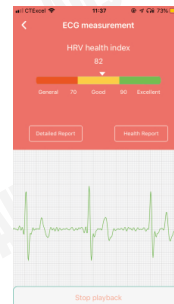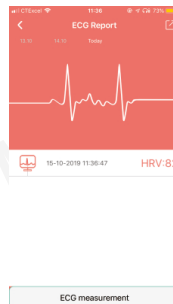


6.2.3.5 Pression Artérielle

Les données les plus récentes relatives à la pression artérielle sont affichées sur la page d'accueil. Appuyer sur la section pour afficher les détails, voir l'historique ou effectuer une prise de mesure en temps réel.

Remarque : Les mesures indiquées sont à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale.



- La mesure la plus récente s'affiche sur la partie supérieure de l'écran.
- Appuyer sur "Mesure unique" pour effectuer une prise de mesure.
- Appuyer sur "Mesure en temps réel" pour afficher votre pression artérielle en temps réelle. Appuyer à nouveau sur « Mesure en temps réel » pour désactiver la fonction. Remarque la fonction de mesure en temps réel doit être désactivée pour retourner sur la page d'accueil.
- L'historique des données est affiché en dessous du graphique. Faire le glisser vers le haut pour afficher les données.
- Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour changer l'affichage des données. Faire glisser la date vers la droite pour afficher l'historique des données.
- Appuyer sur "Partager" et choisir un réseau social pour partager vos données les plus récentes.

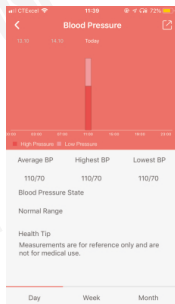

6.2.3.6 Fatigue


L'état de fatigue s'affiche sur la page d'accueil. Appuyer sur la section pour afficher les détails, l'historique ou effectuer une prise de données en temps réel.

- La mesure la plus récente s'affiche sur la partie supérieure de l'écran.
- Appuyer sur "Mesure unique" pour effectuer une prise de mesure.
- L'historique des données est affiché en dessous du graphique. Faire le glisser vers le haut pour afficher les données.
- Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour changer l'affichage des données. Faire glisser la date vers la droite pour afficher l'historique des données.
- Appuyer sur "Partager" et choisir un réseau social pour partager vos données les plus récentes.

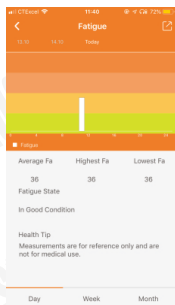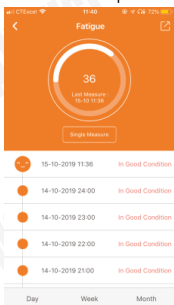

6.2.4 Options

Appuyer sur pour afficher le menu des options du bracelet. Appuyer sur l'une des options pour y entrer.

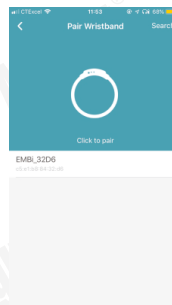

6.2.4.1 Informations Personnelles

Vous pouvez mettre à jour vos informations personnelles dans cette section :

- Sexe
- Age
- Taille
- Poids
- Foulée
- Unité de mesure de distance, taille, poids
- Format de l'heure
- Valeur pression artérielle

Une fois terminé, appuyer sur sauvegarder pour revenir à l'écran d'accueil.



6.2.4.2 Rapport Hebdomadaire

Le rapport hebdomadaire permet de visionner les données de la semaine et de celles passées.



6.2.4.3 Activer l'appareil photo

Cette fonction permet d'activer l'appareil photo de votre téléphone et d'utiliser le E1 comme télécommande de l'appareil.

1. Appuyer sur "Activation Appareil Photo"
2. Une fois l'appareil photo active, secouer le E1 pour prendre une photo.
3. Appuyer sur "Annuler" pour retourner à la page d'accueil




6.2.4.4 Course

Cette fonction permet de suivre et localiser votre course.

Appuyer sur "Durée de course cumulée" pour voir l'historique de course.

Appuyer sur "Commencer" pour démarrer la prise de données



- Appuyer sur < > pour changer l'affichage entre Normal et Carte.
- Appuyer et maintenir le bouton jaune pour mettre en pause
- Lors de la pause, appuyer sur le bouton vert pour reprendre la prise de données.
- Appuyer sur le bouton rouge pour finir la course.

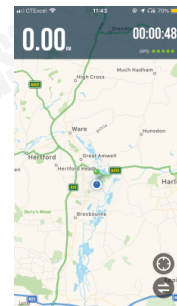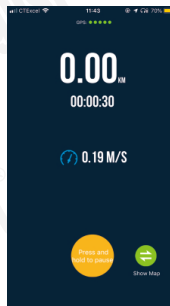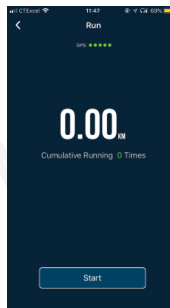

6.2.4.5 Paramètres de l'appareil

Cet écran permet d'afficher le niveau de batterie restant du EMBi ainsi que les options suivantes :

- Gérer la connexion
 - Afficher le statut de la connexion
 - Connecter ou déconnecter le bracelet
- Rechercher bracelet
 - Appuyer sur "Rechercher Bracelet" pour faire vibrer le bracelet et le localiser. Remarque : Cette option ne fonctionne que si le bracelet se trouve à moins de 10m (distance Bluetooth).
- Mémos (Permet de programmer des alarmes silencieuses vibrantes sur le bracelet)
 - Notifications d'appel : sera affiché à l'écran dès qu'un appel entrant survient sur le téléphone connecté.
 - Notification de Messages : dès qu'un message survient sur le téléphone connecté.
 - Réveil : Le bracelet vibrera à l'heure choisie et sera affiché à l'écran. 8 réveils peuvent être créés.
 - Notifications d'applications : Cette fonction permet d'activer ou désactiver les notifications d'applications tierces, telles que Facebook, Twitter, WhatsApp etc...
 - Ne pas déranger : Cette option permet de désactiver toutes les notifications pendant une certaine période donnée (la nuit par exemple).
- Activation automatique de l'écran : Lorsque cette fonction est active, l'écran s'allume automatiquement dès que le poignet est tourné.
- Mesure automatique chaque heure : Lorsque cette option est active une prise de mesure est effectuée automatiquement chaque heure de la journée. Nous recommandons d'activer cette fonction afin d'avoir les données les plus précises.
- Mise à jour micro-logiciel : Cette page affichera la version de votre bracelet et permettra de mettre à jour le logiciel si une nouvelle version est disponible.

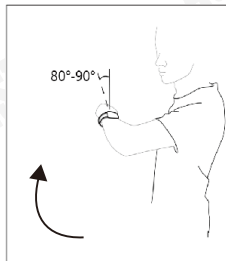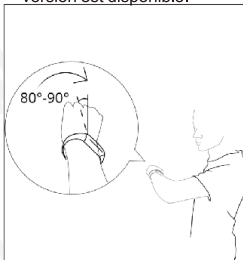

6.2.4.6 Paramètres généraux

- Informations personnelles : Se référer à la section 6.2.4.1.
- Objectif santé : Permet de modifier le nombre de pas à effectuer par jour.
- Application tierce :
 - Apple Health (Appareils Apple uniquement)
 - Google Fit (Appareils Android uniquement)
- Remettre aux paramètres d'usine : Toutes informations contenues dans le bracelet seront effacées.
- Effacer les données permet d'effacer toutes données sur le bracelet ou l'application, ou les deux.

6.2.4.7 À propos


Cette section indique la version de l'application et permet l'accès à la section Aide.

Depuis la section Aide, il est possible de :



- Nous envoyer un commentaire à propos de votre bracelet, de l'application AUDAR, ou déclarer un bug.
- Voir la liste des questions fréquentes (appuyer sur l'une des questions pour afficher la réponse).

6.2.4.8 Informations sur CareMate

S'abonner aux données d'exercice et de santé de quelqu'un. Une demande pour devenir un CareMate peut être soumise en recherchant le numéro de téléphone mobile ou l'adresse électronique utilisées pour s'inscrire à un compte AUDAR.

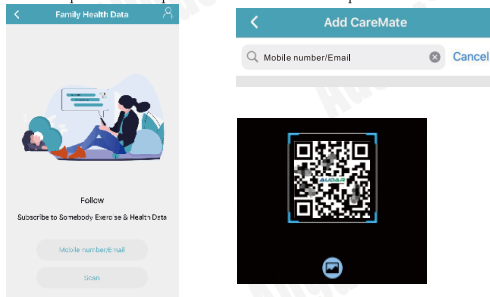


Une fois la demande approuvée, vous pouvez cliquer sur "Mon Gardien" en haut et à droite pour afficher la liste des utilisateurs que vous suivez et surveiller leurs données d'exercice et de santé en temps réel.

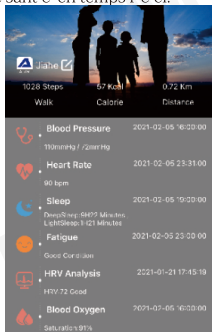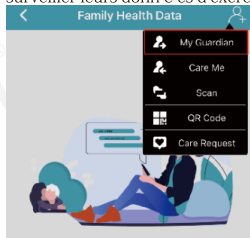

De plus, une demande de suivi peut être soumise en scannant le code QR d'un autre utilisateur. Les informations sur le code QR sont situées dans le menu déroulant en haut et à droite.

Demande CareMate

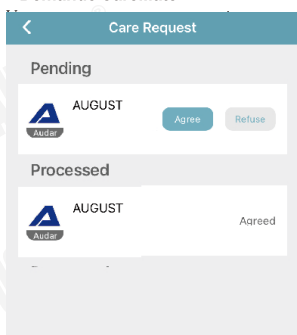


une demande de CareMate en menu déroulant situé en

• Mon Gardien

En cliquant sur « Mon Gardien » dans le menu déroulant en haut et à droite, vous pouvez accéder à une liste complète de tous les gardiens qui vous ont suivi.

La visibilité de chaque donnée de santé pour votre gardien peut être modifiée à tout moment après avoir cliqué sur le gardien individuel dans la liste.

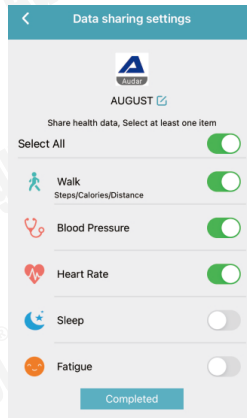

7. Dépannage

Problèmes	Solutions
Le bracelet ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">■ Recharger le E1■ Appuyer et maintenir le bouton pendant 3 secondes
Le bracelet ne se charge pas	<ul style="list-style-type: none">■ Reconnecter le E1 avec le câble de recharge■ Utiliser le câble fourni pour connecter le E1 à un port USB alimenté
Le bracelet ne se connecte pas	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifier que le Bluetooth soit active sur votre appareil■ Vérifier que le E1 se trouve à moins de 10 m de votre appareil■ Vérifier que l'adresse MAC du E1 est la même que celle affichée dans l'application■ S'assurer que toutes les autorisations requises soient autorisées.
Pas de données affichées dans l'application	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifier que le E1 soit connecté à votre appareil■ Activer la prise de mesure automatique dans les paramètres du dispositif
Les notifications ne s'affichent pas	<ul style="list-style-type: none">■ Vérifier que le E1 soit à proximité de votre appareil et que le Bluetooth soit activé■ Vérifier les paramètres des mémos dans l'application

8. Caractéristiques Techniques

Écran couleur	1,22 pouce (2 cm)
Version Bluetooth	V4.2BLE
Type de batterie	Batterie Li-polymer 220 mAh
Autonomie	5 à 7 jours
Autonomie en veille	10 jours
Temps de recharge	Environ 2 heures
Matériau du bracelet	Thermoplastique
Résistance à l'eau et poussière	Ip67
Poids Net	45g
Dimensions	260 x 46,5 x 12,5 mm

9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat initiale. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet à l'adresse <http://www.augustint.com/en/declaration>.

