

**AUDAR**<sup>®</sup>

**User Manual**

**E1**



**August International Ltd**

Rawmec Business Park  
Hoddesdon EN11 0EE  
United Kingdom  
Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:  
Daffodil Germany GmbH  
Bayernstr. 10  
D-30855 Langenhagen  
Germany  
Tel: +49 (0) 511 97812978

[www.audarwatch.com](http://www.audarwatch.com)

- EN Smart Healthcare Watch
- FR Montre Connectée Santé
- DE Intelligentes Gesundheitsarmband
- IT Healthcare Intelligente d'Orologio
- ES Pulsera Inteligente para el Cuidado de la Salud
- JP スマートヘルスケアウォッチ

# Manuale d'Uso

Grazie per aver acquistato l' Audar E1. Questo manuale è disegnato per familiarizzarla con le funzioni di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale anche se è già familiare a prodotti simili.

## Sicurezza

Per garantire la Sua sicurezza e la sicurezza delle altre persone, per favore legga il manuale di istruzione prima di usare questo prodotto. Si prega di non aprire il prodotto da soli. Può essere pericoloso e invaliderà la garanzia del prodotto.

## Smaltimento

Assicurarsi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in osservanza con le direttive SPEE (Smaltimento di Prodotti Elettronici ed Elettrici) e con ogni altra regolamentazione applicabile nel suo Paese. Verificare sempre con le autorità competenti la regolamentazione per lo smaltimento del prodotto.

## Dichiarazione di Conformità




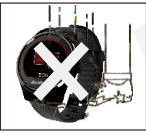
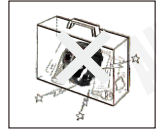

La Dichiarazione di Conformità è disponibile nel nostro sito web all' indirizzo: <http://augustint.com/en/declaration/>

## Servizio clienti

Può contattarci al numero : +44 (0) 845 250 0586 o via email a: [service-it@augustint.com](mailto:service-it@augustint.com) se ha bisogno di supporto tecnico o del servizio clienti

## 1. Istruzioni per la Sicurezza

### ■ Uso e conservazione del prodotto

	Conservare questo dispositivo lontano da temperature estreme.		Tenere il dispositivo lontano dall'acqua e da ambienti umidi.
	Non esporre mai il dispositivo ad umidità, polvere, olio o fumo.		Evitare cadute e non esporre ad impatti.
	Durante il trasporto di questo dispositivo come parte del vostro bagaglio per favore assicurarsi che sia riposto in tutta sicurezza al fine di evitare danni causati da impatti		Mai colpire o graffiare questo dispositivo con ogni tagliente oggetti.

### ■ Manutenzione

Siete pregati di scollegare tutti i cavi prima di pulire il dispositivo.

	Pulire il dispositivo e i pulsanti con un panno Morbido		Non pulire mai questo dispositivo con panni abrasivi. Non usare detersivi, alcool o prodotti per la pulizia a base chimica.
---	---	--	---

## 2. Caratteristiche Principali

- ECG/PPG Battito Cardiaco e Pressione Sanguigna Monitore
- Passi, Distanza Percorsa e Registro Calorie
- Monitora la qualità del sonno
- Smart Chiamate e Messaggi Notifiche
- Compatibile con Apple iOS e Android

## 3. Contenuto della Confezione



E1



USB Magnetico  
Cavo di  
alimentazione



Manuale dell'utente

## 4. Nome delle Componenti e Funzioni



1. Display TFT
2. Tasto Touch
3. Tasto Power
4. ECG Anello Metallico
5. Cinturino

## Guida Rapida

1. Scannerizzare il codice QR sotto riportato con il vostro dispositivo, o cercare, scaricare e installare l'app 'AUDAR' su Google Play o sull'App Store di Apple.



È richiesta una versione Android 4.4 o superiore, oppure iOS 8.2 o superiore.


1. Caricare completamente E1 prima di utilizzarlo la prima volta o se non è stato usato per un lungo periodo. Per caricare il dispositivo, collegare prima l'E1 con il cavo di ricarica magnetico fornito, e poi inserirne il connettore USB nella porta USB alimentata.
2. Mentre la carica è in corso, l'icona della batteria si riempirà progressivamente. Terminata la carica, sarà visualizzata l'icona della batteria piena. Assicurarsi che il voltaggio in uscita dalla porta USB o caricatore sia 5V.
3. Premere e tenere premuto il tasto touch per 5 secondi per accendere il E1.
4. Assicurarsi che il E1 sia entro 10 metri dal dispositivo sorgente. Per associarlo, avviare l'applicazione AUDAR e premere 'Pair wristband'. Controllare di aver dato l'autorizzazione o accettare requisiti di sistema quando sarà richiesto.
5. Una volta associato, inserire le informazioni personali richieste e premere 'Save'. In seguito, impostare l'obiettivo desiderato (numero di passi che si desidera compiere ogni giorno). Completato il passaggio, premere salva per accedere alla home page dell'app.
6. Il E1 è pronto all'uso.

# Contenuti

<b>1. Istruzioni di sicurezza</b>	1
<b>2. Caratteristiche principali</b>	2
<b>3. Contenuto della confezione</b>	2
<b>4. Nome delle Componenti e funzioni</b>	2
<b>5. Caricare il Dispositivo</b>	5
<b>6. Utilizzare il Dispositivo</b>	5
<b>6.1 Orologio</b>	5
6.1.1 Data e Ora (Schermo Predefinito)	5
6.1.2 Passi	6
6.1.3 Calorie	6
6.1.4 Distanza	6
6.1.5 ECG	7
6.1.6 Battito Cardiaco	7
6.1.7 Pressione Sanguigna	8
6.1.8 Sonno	8
6.1.9 Timer	8
6.1.10 Messaggi	9
6.1.11 Trova Phone	9
6.1.12 Impostazione Quadranti	10
6.1.13 Luminosità	10
6.1.14 Informazioni E1	11
<b>6.2 Applicazione AUDAR</b>	12
6.2.1 Asociare il Braccialetto	12
6.2.2 Informazioni Personali	13
6.2.3 Home page	13
6.2.3.1 Passi	14
6.2.3.2 Sonno	14
6.2.3.3 Battito Cardiaco	15
6.2.3.4 HRV Analisi (EGC)	16
6.2.3.5 Pressione Sanguigna	17
6.2.3.6 Stanchezza	18
6.2.4 Opzioni Dispositivo	19
6.2.4.1 Informazioni Personali	19
6.2.4.2 Repport settimanale	20
6.2.4.3 Attiva Camera	20
6.2.4.4 Corsa	20
6.2.4.5 Gestione Dispositivo	21
6.2.4.6 Impostazioni Generali	23
6.2.4.7 A Proposito	23
6.2.4.8 CareMate Informazione	23
<b>7. Risoluzione dei problemi</b>	26
<b>8. Dettagli Tecnici</b>	26
<b>9. Garanzia</b>	27

## 5. Caricare il Dispositivo

Per caricare l'E1, che può essere collegato l'E1 a una porta USB alimentata tramite il cavo fornito.

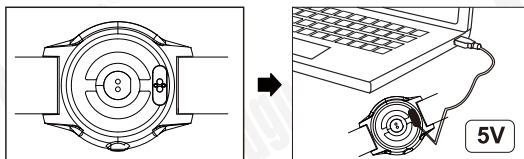

Mentre la carica è in corso, L'icona della batteria si riempirà progressivamente. Terminata la carica, sarà visualizzata l'icona della batteria piena. Assicurarsi che il voltaggio in uscita dalla porta USB o caricatore sia 5V.

## 6. Utilizzare il Dispositivo

### 6.1 Orologio

Premere e tenere premuto il tasto touch per 3 secondi per selezionare il E1.

Per spegnere il E1:

1. Premere il tasto touch per scegliere modalità E1 sistema informazioni.
2. Premere e tenere premuto il tasto touch per 3 secondi.
3. Premere il tasto touch per selezionare YES.
4. Premere e tenere premuto il tasto touch per 3 secondi per confermare di spegnere E1.

Premere il tasto touch per attivare lo schermo. Una volta attivato, lo schermo si illuminerà per 5 secondi. Mentre lo schermo è attivo, premere il tasto touch per visualizzare in successione le seguenti modalità: Data e Ora (Schermo Predefinito), Passi, Calorie, Distanza, ECG, Battito Cardiaco, Pressione Sanguigna, Sonno, Modalità Sport, Cronometro, Messaggi, Trova Telefono, Quadranti, luminosità e Informazioni sul sistema E1.

Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per un uso medico.

### 6.1.1 Data e Ora (Schermo Predefinito)



Giorno  
Data (GG / MM)

Display Ora

Passi    Battito Cardiaco

### 6.1.2 Passi



Passi Effettuati

Il E1 mostrerà sullo schermo il numero di passi effettuati. Per una rilevazione accurata, raccomandiamo di controllare che i dati inseriti nella sezione informazioni personali siano i più possibili precisi (fare riferimento alla sezione 5.2.2).

### 6.1.3 Calorie



Calorie

Il E1 calcolerà le calorie bruciate in base al numero di passi effettuati.

### 6.1.4 Distanza



Distanza

Il E1 calcolerà la distanza percorsa in base al numero di passi effettuati. Per una rilevazione accurata, raccomandiamo di controllare che i dati inseriti nella sezione informazioni personali siano i più possibili precisi (fare riferimento alla sezione 5.2.2).

### 6.1.5 ECG



ECG



ECG  
misurazione  
gesto



Entrati in modalità ECG, preme e tiene premuto il tasto touch per 3 secondi, viene attivata la misura ECG. Per misurare l'ECG, porre il pollice e il dito sull'anello metallico ECG come mostrato, e tenere le dita ferme durante la misurazione. Circa 30 secondi. Dopo aver finito, è possibile verificare i dati ECG nell'APP AUDAR.

Nota: se la forma d'onda dell'ECG è disordinata o deriva seria, il battito cardiaco e la pressione sanguigna potrebbero non essere accurate, quindi si preghiamo di rimisurarli. Se la pelle del dito è asciutta, bagnare la pelle o immergere acqua sul contatto metallico per rimisurare. Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per un uso medico.

### 6.1.6 Battito Cardiaco



Battito Cardiaco

Entrati in modalità battito cardiaco, il E1 inizierà la misurazione del vostro battito cardiaco. Questa operazione può richiedere fino ad un minuto. Una volta terminata la rilevazione, il E1 vibrerà, visualizzando sullo schermo il battito cardiaco attuale in BPM (battiti per minuto).

### 6.1.7 Pressione Sanguigna



Pressione Sanguigna

Entrati in modalità livello pressione sanguigna, il E1 inizierà la misurazione della vostra pressione sanguigna. Questa operazione può richiedere fino a un minuto. Una volta terminata la rilevazione, il E1 vibrerà, visualizzando sullo schermo la rilevazione.

### 6.1.8 Modalità Sleep



Dati del sonno

Quando si entra in modalità Sleep, E1 mostrerà i dati del sonno.

### 6.1.9 Timer



Timer

Premere e tenere premuto il tasto touch per 3 secondi per avviare il cronometro.

Premere il tasto touch per pausa o riprendere il cronometro.

Premere e tenere premuto il tasto touch per 3 secondi per ripristinare il cronometro e uscire.

### 6.1.10 Messaggio



Messaggi

Entrati in modalità Messaggi, E1 mostrerà uno sommario dei messaggi sul cellulare. Premere e tenere premuto il tasto touch per 3 secondi, il E1 mostrerà i dettagli dei messaggi.

### 6.1.11 Trova Phone



Trova Dispositivo Associato

Preme e tiene premuto il tasto touch per 3 secondi per attivare la funzione "Find Paired Device"(Trova dispositivo associato). Il dispositivo associato suonerà o vibrerà in base alle impostazioni, consentendovi di localizzarlo.

Nota: il dispositivo associato deve trovarsi all'interno del raggio Bluetooth per essere rilevato (10m). Se non udite nessun rumore, provate a spostarvi e attivare nuovamente la funzione.

### 6.1.12 Impostazione Quadranti



Impostazione Quadranti

Si accede all'impostazione quadranti, premere il tasto touch per scegliere diversi quadranti.




Tema 1



Tema 2



Tema 3

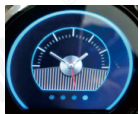

Tema 4


### 6.1.13 Luminosità



Luminosità

Preme e tiene premuto il tasto touch per 3 secondi per attivare funzione di Impostazioni Luminosità. Poi, premere il tasto per impostare il livello di luminosità.

### 6.1.14 Informazioni E1

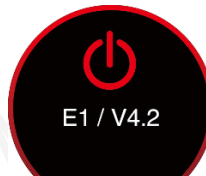

Informazioni sul Sistema E1

La sezione Informazioni del E1 fornisce un'identificazione unica per il braccialetto. Questa funzione è utile se si sta associando il braccialetto quando ci sono diversi E1 nelle vicinanze.

Premere e tenere premuto il tasto touch per 3 secondi. Premere il tasto touch per selezionare YES. Premere e tenere premuto il tasto touch per 3 secondi per confermare che si desidera disattivare E1.



## 5.2 Applicazione AUDAR

Scannerizzare il codice QR sotto riportato con il vostro dispositivo, o cercare, scaricare e installare l'app "AUDAR" su Google Play o sull'App Store di Apple.




È richiesta una versione Android 4.4 o superiore, oppure iOS 8.2 e superiore.

### 5.2.1 Associare il Braccialeto


1. Abilitare il Bluetooth nel vostro dispositivo e assicuratevi che si trovi entro 10 metri dal E1.
2. Avviare "AUDAR" e selezionare "Pair wristband".
3. Selezionare E1 dalla lista dispositivi.
4. Se più di un E1 è nelle vicinanze, controllare l'indirizzo MAC sul EMBi per determinare quale selezionare (fare riferimento alla sezione 5.1.10).
5. Una volta associato, l'icona dello stato della connessione Bluetooth apparirà sullo schermo del E1.

Nota: per i dispositivi Android, assicurarsi di aver concesso l'autorizzazione a "AUDAR" quando richiesto. Per i dispositivi iOS, assicurarsi di confermare i requisiti della connessione Bluetooth quando richiesto.

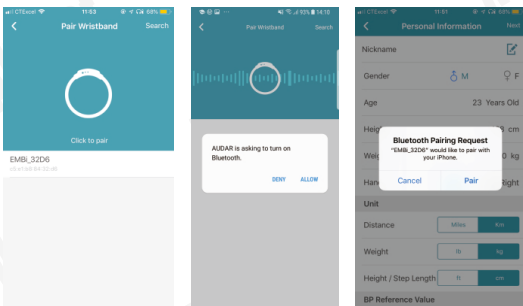


### 5.2.2 Informazioni Personali

Una volta associato il E1, inserire le informazioni personali richieste e premere "Save". In seguito, impostare l'obiettivo desiderato (numero di passi che si desidera compiere ogni giorno). Completato il passaggio, premere Salva per accedere alla home page dell'App. È possibile modificare queste informazioni anche in seguito. Fare riferimento alla sezione 5.2.4.1 per maggiori informazioni.

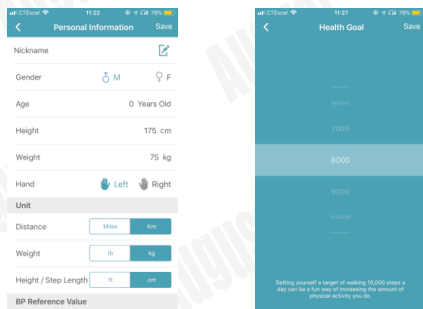

### 5.2.3 Home Page

La home page consente di vedere il numero di passi effettuati, il tempo dormito e le misurazioni più recenti del battito cardiaco, HRV Analisi, pressione sanguigna e stato stanchezza.

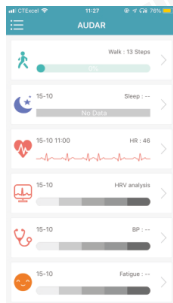

Nota: Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per un uso medico.




### 5.2.3.1 Passi

Il conteggio attuale del numero di passi sarà visualizzato sulla home page. Premere sulla sezione passi presente nella home page per vedere ulteriori informazioni.

Nota: Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per uso medico.

- Scorrere la data verso destra per vedere i dati precedenti.
- Premere una barra sul grafico per visualizzare il numero esatto di passi effettuati.
- Sotto il grafico a barre, è possibile trovare ulteriori informazioni sui passi effettuati, distanza percorsa e calorie bruciate.
- Premere <Notes> per cambiare l'obiettivo (numero di passi che si intende effettuare ogni giorno).
- Selezionare giorno, settimana o mese per cambiare la durata del periodo visualizzata.
- Premere condividi e scegliere un servizio social media per condividere le informazioni più recenti.

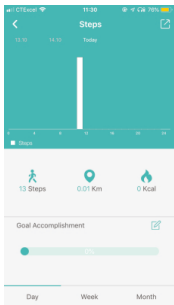


### 5.2.3.2 Sonno

I dati più recenti relativi al sonno saranno visualizzati sulla home page. Premere sulla sezione sonno presente nella home page per vedere informazioni più dettagliate.

Nota: Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per un uso medico.

- Scorrere la data verso destra per vedere i dati precedenti.
- Premere una barra sul grafico per visualizzare esattamente il sonno durante il periodo.
- Selezionare giorno, settimana o mese per cambiare la durata del periodo visualizzata.
- Premere condividi e scegliere un servizio social media per condividere i dati recenti relativi al sonno.

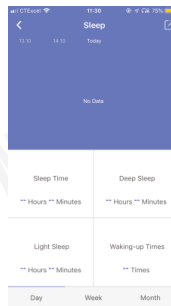


### 5.2.3.3 Battito Cardiaco

Le misurazioni più recenti relative al battito cardiaco saranno visualizzate nella home page. Premere sulla sezione battito cardiaco presente nella home page per vedere informazioni più dettagliate.

Nota: Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per un uso medico.



- Le misurazioni più recenti sono visualizzate nella metà superiore dello schermo.
- Battito cardiaco monitoraggio e il test ECG nel dispositivo possono aggiornare i dati della frequenza cardiaca.
- Altre misurazioni recenti sono mostrate nella metà inferiore dello schermo. Scorrere verso l'alto per visualizzare le misurazioni precedenti.
- Selezionare giorno, settimana o mese per visualizzare un grafico a barre delle misurazioni del battito cardiaco. Premere una barra sul grafico per visualizzare informazioni più dettagliate. Scorrere la data verso destra per vedere i dati precedenti.
- Premere condividi e scegliere un servizio social media per condividere le misurazioni più recenti.

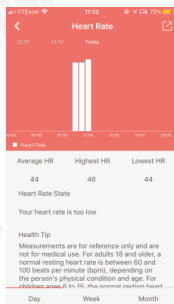

#### 5.2.3.4 HRV Analisi (ECG)

Premere "Misurazione ECG" e "iniziare la misurazione", la misurazione ECG viene attivato. Per misurare l'ECG nell'APP, porre il pollice e il dito sull'anello metallico ECG come mostrato, e tenere le dita ferme durante la misurazione. Circa 30 secondi, è possibile verificare i dati ECG.

- Le misurazioni più recenti sono visualizzate sulla metà superiore dello schermo.
- Altre misurazioni recenti sono mostrate nella metà inferiore dello schermo. Scorrere verso l'alto per visualizzare le misurazioni precedenti.
- Selezionare giorno, settimana o mese per visualizzare un grafico a barre delle misurazioni dell'ossigeno nel sangue. Permettere una barra sul grafico per visualizzare informazioni più dettagliate. Scorrere la data verso destra per vedere i dati precedenti.
- Premere condivideri e scegliere un servizio social media per condividere le misurazioni più recenti.

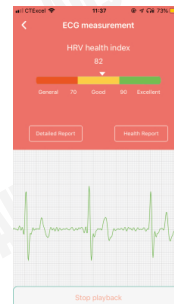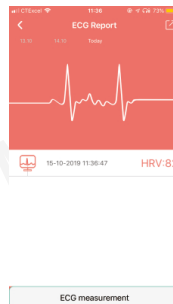


#### 5.2.3.5 Pressione Sanguigna

Le misurazioni più recenti relative alla pressione sanguigna saranno visualizzate nella home page. Premere sulla sezione pressione sanguigna presente nella home page per vedere informazioni più dettagliate.

Nota: Le misurazioni servono soltanto come valore di riferimento e non per un uso medico.



- Le misurazioni più recenti sono visualizzate sulla metà superiore dello schermo.
- Altre misurazioni recenti sono mostrate nella metà inferiore dello schermo. Scorrere verso l'alto per visualizzare le misurazioni precedenti.
- Selezionare giorno, settimana o mese per visualizzare un grafico a barre delle misurazioni della pressione sanguigna. Permettere una barra sul grafico per visualizzare informazioni più dettagliate. Scorrere la data verso destra per vedere i dati precedenti.
- Premere condivideri e scegliere un servizio social media per condividere le misurazioni più recenti.

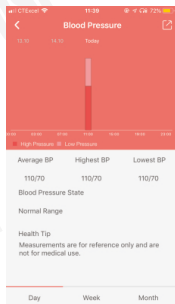

### 5.2.3.6 Stanchezza


Le misurazioni più recenti relative al livello di stanchezza saranno visualizzate sulla home page. Premere sulla stanchezza presente nella home page per vedere informazioni più dettagliate o eseguire una nuova misurazione.

- Le misurazioni più recenti sono visualizzate sulla metà superiore dello schermo.
- Altre misurazioni recenti sono mostrate nella metà inferiore dello schermo. Scorrere verso l'alto per visualizzare le misurazioni precedenti.
- Selezionare giorno, settimana o mese per visualizzare un grafico a barre delle misurazioni dell'ossigeno nel sangue. Premere una barra sul grafico per visualizzare informazioni più dettagliate. Scorrere la data verso destra per vedere i dati precedenti.
- Premere condivideri e scegliere un servizio social media per condividere le misurazioni più recenti.

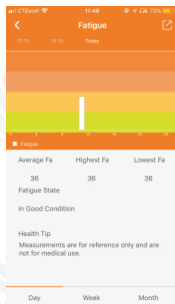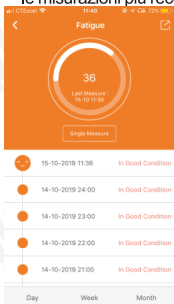

## 5.2.4 Opzioni Dispositivo

Premere per visualizzare il menu opzioni dispositivo. Premere su una delle opzioni per accedere alla sezione corrispondente.

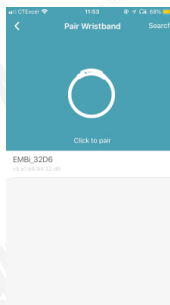


### 5.2.4.1 Informazioni Personali

Su questa sezione è possibile visualizzare e modificare le seguenti informazioni personali:

- Genere
- Età
- Altezza
- Peso
- Mano del braccialeto
- Unità di misurazione per distanza, altezza e peso
- Formato Orario
- Valori Pressione Sanguigna

Una volta terminato, premere salva per tornare alla pagina principale dell'app.

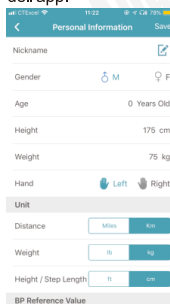

### 5.2.4.2 Report Settimanale

Il report settimanale consente di vedere sullo schermo tutti i dati della settimana precedente.



### 5.2.4.3 Attiva Camera

Questa funzione consente di attivare la camera del cellulare a distanza, scuotendo il E1.

1. Premere su "Attivate camera" per iniziare.
2. Attivata la camera, scuotere il polso con il E1 per scattare una foto.
3. Premere "Cancel" per tornare alla home page.




### 5.2.4.4 Corsa

Questa funzione vi aiuterà a monitorare la vostra corsa.

Premere su "Cumulative Running X Times" per vedere idati storici relativi alla corsa.




Premere su "Start" per iniziare la corsa.

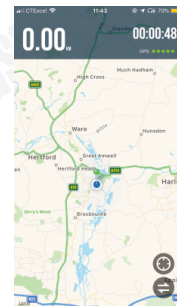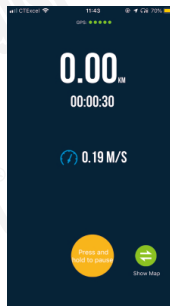
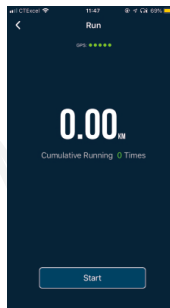
- Premere < ⏪ > per cambiare tra visualizzazione normale e mappa.
- Premere e tenere premuto il tasto giallo per mettere in pausa.
- In pausa, premere il tasto verde per riprendere.
- Premere il tasto rosso per terminare la corsa.



### 5.2.4.5 Gestione Dispositivi

La schermata di gestione dispositivo consente di controllare il livello della batteria del E1 e usare le seguenti funzioni:

- Gestione Connessione
  - Vedere lo stato connessione del braccialeto
  - Associare o scollegare il braccialeto
- Cerca Braccialeto
  - Premendo "Aearch Wristband" il braccialeto vibrerà, consentendovi di localizzarlo. Nota: la funzione cerca funzionerà solo se il braccialeto è all'interno del raggio Bluetooth (10 m).
- Promemoria (consente di impostare notifiche con vibrazioni silenziose)
  - Notifica Chiamate: <  > sarà visualizzata quando c'è una chiamata in entrata.
  - Notifica Messaggio: <  > sarà visualizzata quando c'è un messaggio in entrata.
  - Allarme Sveglia: il braccialeto vibrerà all'ora impostata e <  > sarà visualizzata sullo schermo.
  - Notifica App: Da questa sezione è possibile scegliere se visualizzare le notifiche da una serie di App come Facebook, Twitter, WhatsApp ecc.
  - Non Disturbare: La funzione non disturbare consente di impostare un periodo durante il quale tutte le notifiche saranno ignorate (es. di notte dalle 23:00 alle 08:00).
- Attivazione Automatica dello Schermo: Se abilitata, lo schermo si attiverà quando si muove il polso.
- Misurazione Oraria Automatica: Se abilitata, una misurazione sarà eseguita automaticamente allo scoccare di ogni ora. Raccomandiamo di abilitare questa funzione per ittenere dei dati più accurati.
- Aggiornamento Firmware: Questa pagina mostra la versione corrente del firmware del braccialeto e informa quando una unova versione è disponibile.

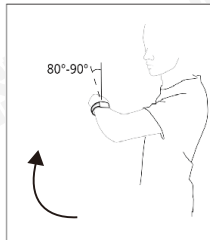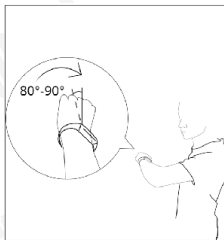

## 5.2.4.6 Impostazioni Generali

- Informazioni Personali: fare riferimento alla sezione 5.2.4.1 per ulteriori informazioni.
- Obiettivo Salute: Consente di impostare il numero di passi che si perfigge di camminare ogni giorno.
- Integrazione di App di Terze Parti
  - Apple Health (solo per Dispositivi Apple)
  - Google Fit (solo per Dispositivi Android)
- Ripristino Impostazioni di Fabbrica: consente di eseguire un ripristino totale delle impostazioni di fabbrica, che rimuoverà tutti i dati ed eliminerà la connessione tra l'applicazione e il braccialeto.
- Elimina Dati: consente di eliminare tutti i dati salvati sull'applicazione.

## 5.2.4.7 A Proposito

La sezione A Proposito permette di visualizzare il numero versione dell'applicazione e consente di accedere alla sezione Aiuto.



Dalla sezione Aiuto è possibile:

- Inviaci feedback e suggerimenti sul braccialeto, sull'applicazione August AUDAR, oppure riportare un bug.
- Consultare una lista di domande frequenti (premere su una domanda per leggere la risposta).


## 6.2.4.8 CareMate Informazione

### Abbonarsi a Qualcuno Dati di Esercizio e Salute

Una richiesta per partecipare Funzione 'Caremate' via cercare il numero di cellulare o l'indirizzo email usato per iscriversi ad account AUDAR.

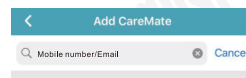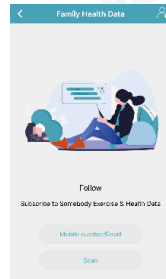


Dopo aver ottenuto l'approvazione, è possibile fare clic su 'Ho cura di' in alto a destra per vedere il lista degli utenti seguito, e monitorare i loro dati di esercizio e salute in tempo reale.

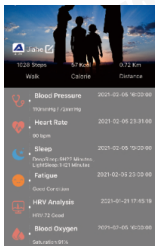

Inoltre, la richiesta seguita può essere inviata scansionando il codice QR di altri utenti. Le informazioni sul codice QR si trovano nel Menu in alto a destra.

#### ● Applicazione di Amici e Parenti


Può accettare o rifiutare qualsiasi richiesta di CareMate cliccando su 'Richiesta di amici e parenti' nel Menu in alto a destra.

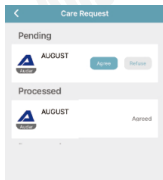

#### ● Mi Guarda

Cliccando su 'Mi guarda' nel Menu in alto a destra, è possibile accedere alla lista di tutti i chi hanno seguito il suo CareMate.

La visibilità di ogni dato sanitario può essere modificata in qualsiasi momento per amici e parenti che ti seguono nella lista CareMate.

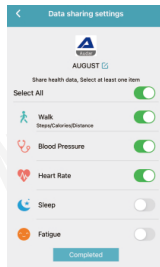

## 7. Risoluzione dei Problemi

Problema	Soluzione
Non si accende	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Caricare completamente il E1</li><li>■ Premere e tenere premuto il tasto touch per 3 secondi</li></ul>
Non si carica	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Riconnettere E1 con il cavo di alimentazione</li><li>■ Usare il cavo di alimentazione fornito per connetterlo alla porta USB alimentata</li></ul>
Non si associa	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controllare che il Bluetooth nel vostro dispositivo sia abilitato</li><li>■ Controllare che E1 sia entro 10 m dal dispositivo</li><li>■ Controllare che l'indirizzo MAC del E1 sia lo stesso mostrato nell'app</li><li>■ Assicurarsi di aver accettato i requisiti di sistema quando associato</li></ul>
Nessun dato nell'app	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controllare che il E1 sia associato al dispositivo</li><li>■ Provare ad abilitare la Misurazione Oraria Automatica in Gestione Dispositivo</li></ul>
Non riceve notifiche	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controllare che il E1 sia associato al dispositivo</li><li>■ Controllare le impostazioni Promemoria nella sezione Gestione Dispositivo</li></ul>

## 8. Dettagli Tecnici

Schermo TFT Colorato	1,22 pollici
Versione Bluetooth	v4.2BLE
Tipo Batteria	Batteria ai Polimetri di Litio220mAh
Autonomia	5 - 7 Giorni
Tempo in Standby	Circa 10 Giorni
Tempo di Carica	Circa 2 Ore
Metariale Cinturino	TPU
Anti-polvere ed Impermeabile	IP67
Peso Netto	45g
Dimensioni	260 x 46.5 x 12.5mm

## 9. Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato. Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.
- La garanzia copre soltanto l'unità principale, non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamità naturali.
- La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali.
- Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non assumiamo responsabilità per nessuna restituzione inaspettata.
- Qualunque prodotto danneggiato deve essere conservato e ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.

### Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: [service-it@augustint.com](mailto:service-it@augustint.com)

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere consultata online presso <http://www.augustint.com/en/declaration>.

